


A close-up photograph of a red leather chair back. The leather has a fine, pebbled texture. A silver-colored metal detail, possibly a hinge or part of the chair's mechanism, is visible on the left side, partially obscured by the leather. The background is dark, making the red leather stand out.

# Euronda Praxisstühle

DEUTSCH

Euronda<sup>®</sup>

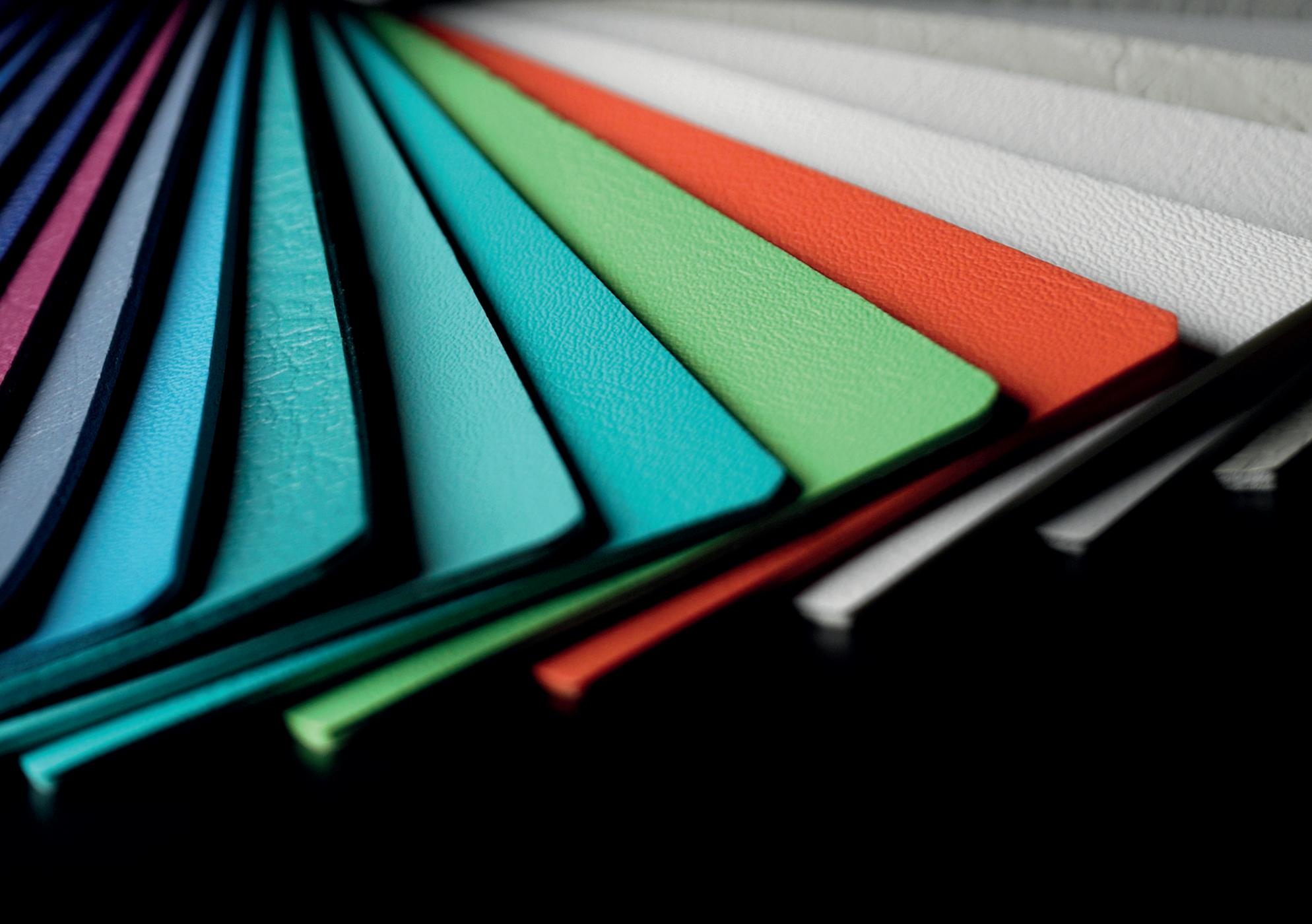



## Drei Modelle - Große Vielfalt

Praxisstühle von Euronda zeichnen sich durch Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die Modelle Onyx, Coral und CDS 301 ermöglichen durch mehrfach verstellbare Rückenlehnen und komfortable Sitzflächen eine bequeme und ergonomische Arbeitshaltung während der Behandlung. So individuell wie ihre Praxis, lässt sich auch Ihr Praxisstuhl von Euronda gestalten: Wählen Sie aus über 20 Bezügen die Farbe und Ausführung, die am besten zu Ihnen und Ihrer Behandlungseinheit passt. Auf Wunsch beziehen wir Ihren neuen Arbeitsplatzstuhl auch mit einem individuellen Bezug.



# ONYX


Leicht und schlicht



39x9 cm



58 cm

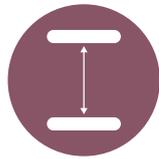

50-65 cm



11 kg

Das Gestell in leichter und hochwertiger Optik aus gebürstetem Aluminium verfügt über fünf selbstbremsende Rollen. Ein umlaufender Ring unter dem Sitz ermöglicht eine einfache Höhenverstellung von 50-65 cm. Anatomische Rückenlehne, welche in drei unterschiedlichen Stellungen justierbar und um 360° drehbar ist.



# CORAL

Praktisch und funktional



39x9 cm



60-46 cm



50-68 cm



13 kg

Der robuste Praxishocker Coral besteht aus recyclingfähigem, stoß- und feuerfestem Polyamid. Fünf selbstbremsende Rollen sitzen an einem Rollenkranz, der auch als Fußablage dient. Die Rückenlehne ist flexibel einstellbar. Ein umlaufender Ring zur stufenlosen Höhenverstellung ist unauffällig in das Design des Sitzes integriert.





# CDS301


Elegant und edel



40x10 cm



46 cm

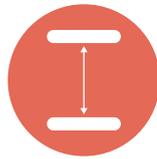

51-69 cm



15 kg

Das verchromte Stahlgestell verleiht dem CDS 301 einen zeitlos edlen Charakter. Für Ergonomie sorgt die rund um den Sitz drehbare Rückenlehne. Sie lässt sich in drei horizontalen Positionen und in der Tiefe verstellen. Selbstbremsende Schwenkrollen bieten ein sehr gutes Rollverhalten. Die Höhe lässt sich dank des umlaufenden Kranzes unter der Sitzfläche bequem und stufenlos einstellen.




# Wählen Sie Ihre Farbe

Eine große Auswahl an Polsterfarben  
steht zur Auswahl




## Nahtlose Polster


---

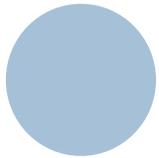


E09

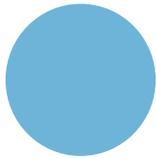

E14

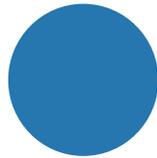


E25

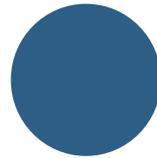


E17




E06

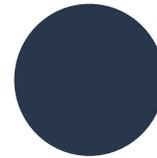

E28

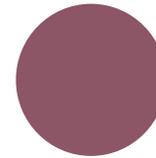

E07

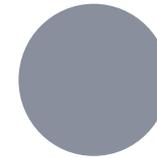


E05




E04




E08

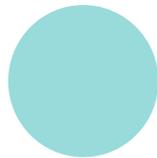


E10

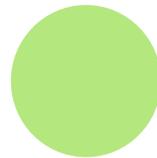

E26

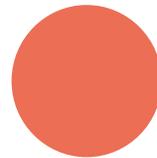

E27

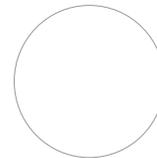


E16



E12



E02

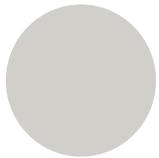

E15



E01



E18



E03

## Genähte Polsterkanten

---



E19

# Euronda®

## EURONDA SPA

Via dell'Artigianato, 7

36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) - Italy

tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246

info@euronda.com - www.euronda.com

## Deutschland

EURONDA DEUTSCHLAND GMBH

Am Landwehrbach 5

48341 Altenberge - Deutschland

tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29

info@euronda.de - www.euronda.de

## España

EURONDA SPA

IDENTYD - Av. Cabezo de Torres, 4, local

30007 Murcia - España

Atención al cliente: 900102034

info@euronda.es - www.euronda.es

## France

EURONDA FRANCE

ZAC Les Vallées - Avenue de Bruxelles

60110 Amblainville - France

tél. +33 (0)3.44.06.69.70 - fax +33 (0)3.44.02.03.89

info@euronda.fr - www.euronda.fr

## Russia

OOO FINSTAR

5/2a Varshavskaya str.

196128, St. Petersburg - Russia

info@finstartech.ru