

Euronda

Wartungsübersicht Autoklaven


Euronda[®]

Pro System

Wartungsübersicht Autoklaven

Nachfolgend die von Euronda empfohlenen Wartungsintervalle für Autoklaven und die dafür benötigten Ersatzteilsets. Wartungen und Reparaturen dürfen von geschulten Servicepartnern oder durch Euronda selbst durchgeführt werden. Nur vorschriftsmäßig gewartete Geräte ermöglichen einen langen und zuverlässigen Betrieb.

Dokumentieren Sie jede Wartung im Serviceheft. Wartungsetiketten liegen den Wartungssets bei.

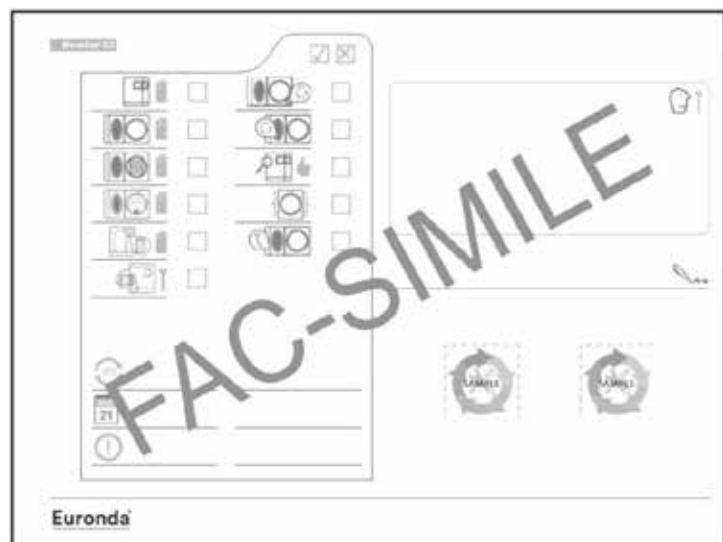

Die angegebenen Preise enthalten nur die Materialkosten gemäß Euronda Hersteller-Preiseempfehlung. Arbeitszeiten sind Richtwerte für Geräte, die so installiert wurden, dass ein einfacher Service-Zugang möglich ist.

Die Euronda Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Artikelnummern und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Autoklav E10-7"

Zeitraum	Bezeichnung	Anzeige	Arbeitszeit	Kosten
nach 500 Zyklen / 1 Jahr	Artikelnummer 831793 Bakteriologischer Filter	M1	Eigenleistung	inkl.*
alle 1000 Zyklen / 1 Jahr	Artikelnummer 540523 Silikon-Türdichtung	M2	Eigenleistung	je 55,50 €

*Ein zusätzlicher Filter ist bereits im Starterkit enthalten.

3000 Zyklen / 2 Jahre	Artikelnummer 815411 • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Silikonschlauch 6x10 • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,25 Stunden	141,56 €
6000 Zyklen / 4 Jahre	Artikelnummer 815412 • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Silikonschlauch 6x10 • Sicherheitsventil D-7 • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,5 Stunden	208,27 €
9000 Zyklen / 6 Jahre	Artikelnummer 815413 • Silikon-Türdichtung • Bakteriologischer Filter • Silikonschlauch 6x10 • Wasserzuleitungspumpe EX5 • Ventil S11 • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,75 Stunden	333,22 €
12 000 Zyklen / 8 Jahre	Artikelnummer 815414 • Silikon-Türdichtung • Bakteriologischer Filter • Silikonschlauch 6x10 • Sicherheitsventil D-7 • Wasserpumpe Separator • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	3,5 Stunden	388,75 €
15 000 Zyklen / 10 Jahre	Artikelnummer 815411 • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Silikonschlauch 6x10 • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,5 Stunden	141,56 €
12 Jahre	Artikelnummer 815412 • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Silikonschlauch 6x10 • Sicherheitsventil D-7 • Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,75 Stunden	208,27 €



Autoklaven E10 | E9 | E8 | E6 | EXL

Zeitraum	Bezeichnung	Anzeige	Arbeitszeit	Kosten
nach 500 Zyklen / 1 Jahr	Artikelnummer 831793 Bakteriologischer Filter	M1	Eigenleistung	inkl.*
alle 1000 Zyklen / 1 Jahr	Artikelnummer 540523 Silikon-Türdichtung	M2	Eigenleistung	je 55,50 €

*Ein zusätzlicher Filter (modellabhängig) ist bereits im Starterkit enthalten.

3000 Zyklen / 2 Jahre	Artikelnummer 815170 <ul style="list-style-type: none"> • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Silikonschlauch 6x10 	M3	2,25 Stunden	128,22 €
6000 Zyklen / 4 Jahre	Artikelnummer 815174 <ul style="list-style-type: none"> • Bakteriologischer Filter • Silikon-Türdichtung • Ventil 1/8 • Silikonschlauch 6x10 • Sicherheitsventil D-7 • Schalldämpfer Tankabfluss 	M3	2,5 Stunden	180,20 €
9000 Zyklen / 6 Jahre	Artikelnummer 815172 <ul style="list-style-type: none"> • Silikon-Türdichtung • Bakteriologischer Filter • Silikonschlauch 6x10 • Wasserzuführungspumpe EX5 	M3	2,75 Stunden	190,58 €

Wartungsübersicht Autoklaven 2026

Rev 00

Zeitraum	Bezeichnung	Anzeige	Arbeitszeit	Kosten
12 000 Zyklen / 8 Jahre	Artikelnummer 815369 <ul style="list-style-type: none">• Silikon-Türdichtung• Bakteriologischer Filter• Ventil 1/8• Silikonschlauch 6x10• Sicherheitsventil D-7• Silikonschlauch 6x10 (5 Stück)• Wasserpumpe Separator• Schalldämpfer Tankabfluss	M3	3,5 Stunden	305,95 €
15 000 Zyklen / 10 Jahre	Artikelnummer 815170 <ul style="list-style-type: none">• Bakteriologischer Filter• Silikon-Türdichtung• Silikonschlauch 6x10	M3	2,5 Stunden	128,22 €
12 Jahre	Artikelnummer 815174 <ul style="list-style-type: none">• Bakteriologischer Filter• Silikon-Türdichtung• Ventil 1/8• Silikonschlauch 6x10• Sicherheitsventil D-7• Schalldämpfer Tankabfluss	M3	2,75 Stunden	180,20 €
14 Jahre	Artikelnummer 815172 <ul style="list-style-type: none">• SilikonTürdichtung• bakteriologischer Filter• Silikonschlauch 6x10• Wasserzuführungspumpe EX5	M3	3 Stunden	190,58 €

Prüfungen nach BetrSichV

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verlangt in Deutschland vom Arbeitgeber die regelmäßige Überprüfung einer Druckanlage auf sicheren Betrieb. Die technischen Prüfungen (außer Druckfestigkeitsprüfung) sind in die Wartungsanleitungen für Euronda-Autoklaven integriert.

Zeitraum	Bezeichnung	Anzeige	Arbeitszeit	Kosten
alle 2 Jahre	Äußere Prüfung		in Wartung enthalten	
alle 10 Jahre	Innere Prüfung		in Wartung enthalten	
nach 10 / 15 Jahren	Druckfestigkeitsprüfung oder Kesseltausch		auf Anfrage	